



## Transiluminador

### Transiluminador UV

Utilizado para a visualização segura de bandas em géis de eletroforese corados com marcadores fluorescentes, como brometo de etídio e corante *safer*.

Possui ajuste de intensidade de luz (70% e 100%), que possibilita a visualização de quantidades mínimas de material genético, e comprimento de onda de 302 nm<sup>1</sup> (312).

### Segurança


Tradicionalmente, as tampas fabricadas em acrílico bloqueiam 92% dos raios UV. O transiluminador Kasvi possui tampa submetida a tratamento especial que proporciona maior segurança aos usuários através do bloqueio de mais de 96% dos raios UV emitidos.

<sup>1</sup>Outros fabricantes referem-se a esse comprimento de onda como 300 nm ou 312 nm. A excitação espectral de todas essas regiões é a mesma.


Imagens meramente ilustrativas. Produtos não passíveis de regulamentação na ANVISA.

## Desempenho

Diferente dos transiluminadores convencionais que possuem luz azul quando o equipamento está ligado, o Transiluminador UV Kasvi possui um filtro especial que bloqueia a luz visível, permitindo apenas a passagem da luz UV, diminuindo a interferência na observação das amostras. Essa inovação permite que a fluorescência seja emitida de modo uniforme, aumentando o contraste e permitindo uma melhor visualização das bandas.

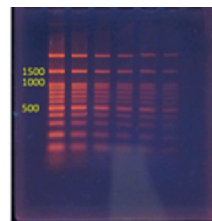

Transiluminador Kasvi

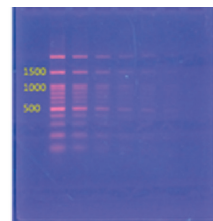


Transiluminador Convencional

## Design

Tampa protetora desenvolvida para que o usuário estabeleça um ângulo fixo de trabalho, facilitando a manipulação do gel.

Tratamento para bloqueio da luz UV

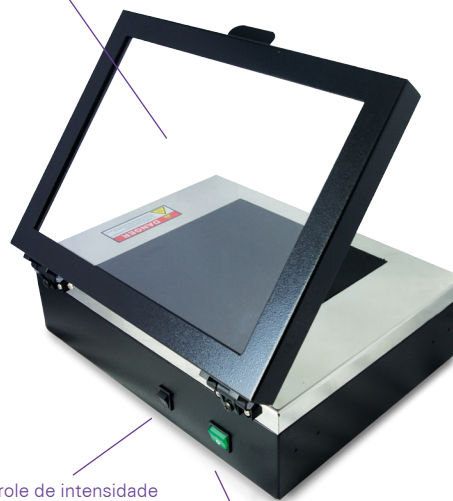

Controle de intensidade (70% e 100%)

Botão liga/desliga

\*Luz verde para indicar emissão de luz UV

## Especificações Técnicas

| Especificações        | Descrição                 |
|-----------------------|---------------------------|
| Área de Visualização  | 20 x 20 cm                |
| Comprimento de Onda   | 302 nm <sup>1</sup> (312) |
| Lâmpadas              | 6 lâmpadas de 8 W         |
| Tensão                | AC 110/220 V              |
| Frequência            | 50/60 Hz                  |
| Dimensões (L x C x A) | 34,1 x 28,0 x 12,9 cm     |
| Peso                  | 7,8 kg                    |

### Embalagem contém:

- 1 Transiluminador UV;
- 1 Cabo de energia AC;
- 1 Manual de instruções.

| Modelo   | Descrição  | Apresentação |
|----------|--|--------------|
| K33-312A | Transiluminador UV 302 nm <sup>1</sup> (312) 20 x 20 cm, bivolt (110-220 V, 50/60 Hz). | Unidade      |

<sup>1</sup>Outros fabricantes referem-se a esse comprimento de onda como 300 nm ou 312 nm. A excitação espectral de todas essas regiões é a mesma.

Imagens meramente ilustrativas. Produtos não passíveis de regulamentação na ANVISA.

## Transiluminador LED

O transiluminador LED é um equipamento leve e com design moderno, além de ser uma inovação na área de eletroforese. Ao contrário dos transiluminadores tradicionais com luz UV, a iluminação de LED não causa deterioração da amostra e não é nociva ao usuário.

Acompanha câmara escura que permite documentar e arquivar rapidamente imagens dos géis através de câmeras fotográficas comuns, inclusive câmeras de telefones celulares.





### Características

- Equipamento leve e de fácil transporte;
- Indicado para géis corados com corante *Safer Kasvi* ou *SYBR Safe*;
- Melhor desempenho – Ao emitir a luz azul, a lâmpada de LED emite um comprimento de onda de aproximadamente 470 nm, efetivando a excitação dos corantes;
- Orifícios de Ventilação – Permitem a dissipação do calor evitando sobrecarga;
- Fonte de luz LED – Proporciona maior segurança ao operador;
- Lâmpada de LED – Vida útil de aproximadamente 30.000 horas;
- Câmara escura - Facilita a captura de imagens, dispensando o uso dos sistemas de fotodocumentação tradicionais.

Imagens meramente ilustrativas. Produtos não passíveis de regulamentação na ANVISA.

Corrida em Gel  
de Agarose  
Transiluminador  
LED Kasvi

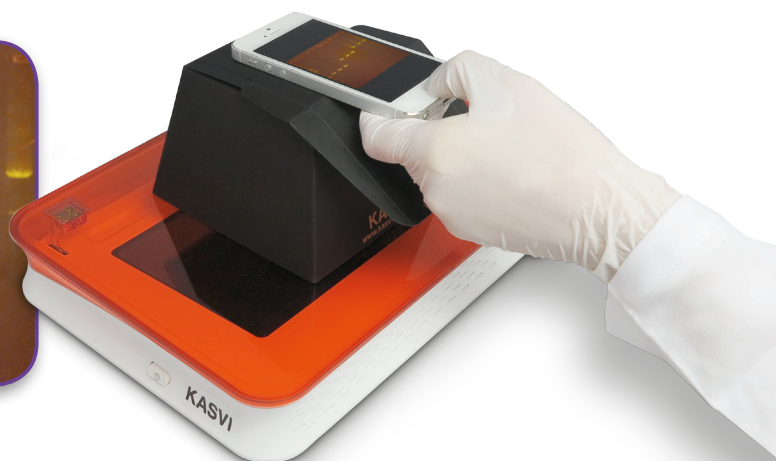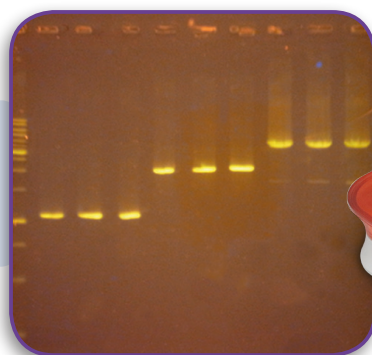

#### Câmara Escura

Permite a captação de imagens com qualidade através de câmeras fotográficas comuns e telefones celulares, podendo ser enviadas diretamente por Bluetooth ou e-mail.

## Especificações Técnicas

| Especificações                     | Descrição            |
|------------------------------------|----------------------|
| Dimensões (L x C x A)              | 29,5 x 21,5 x 4,2 cm |
| Área de Visualização (L x C)       | 20,0 x 12,0 cm       |
| Lâmpada/Duração                    | LED Azul/ >30.000Hrs |
| Comprimento de Onda                | 470 nm               |
| Temperatura de Operação            | Até 40° C            |
| Tensão                             | AC 110/220 V         |
| Frequência                         | 50/60 Hz             |
| Corrente                           | 1,4 A                |
| Desligamento Automático (Shut-off) | 5 minutos            |
| Peso                               | 1,2 kg               |

| Modelo  | Descrição           | Apresentação |
|---------|---------------------|--------------|
| K33-333 | Transiluminador LED | Unidade      |

#### Embalagem contém:

- 1 Transiluminador LED;
- 1 Câmara escura para fotodocumentação;
- 1 Faca para gel;
- 1 Lâmina de substituição para faca de gel;
- 1 Cabo de energia AC;
- 1 Adaptador para tomada;
- 1 Manual de instruções.



Imagens meramente ilustrativas. Produtos não passíveis de regulamentação na ANVISA.